

GWL-TSC 升降炉资料及价格



主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province



咨询电话

400-668-1868
+86 379-69936789




主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province

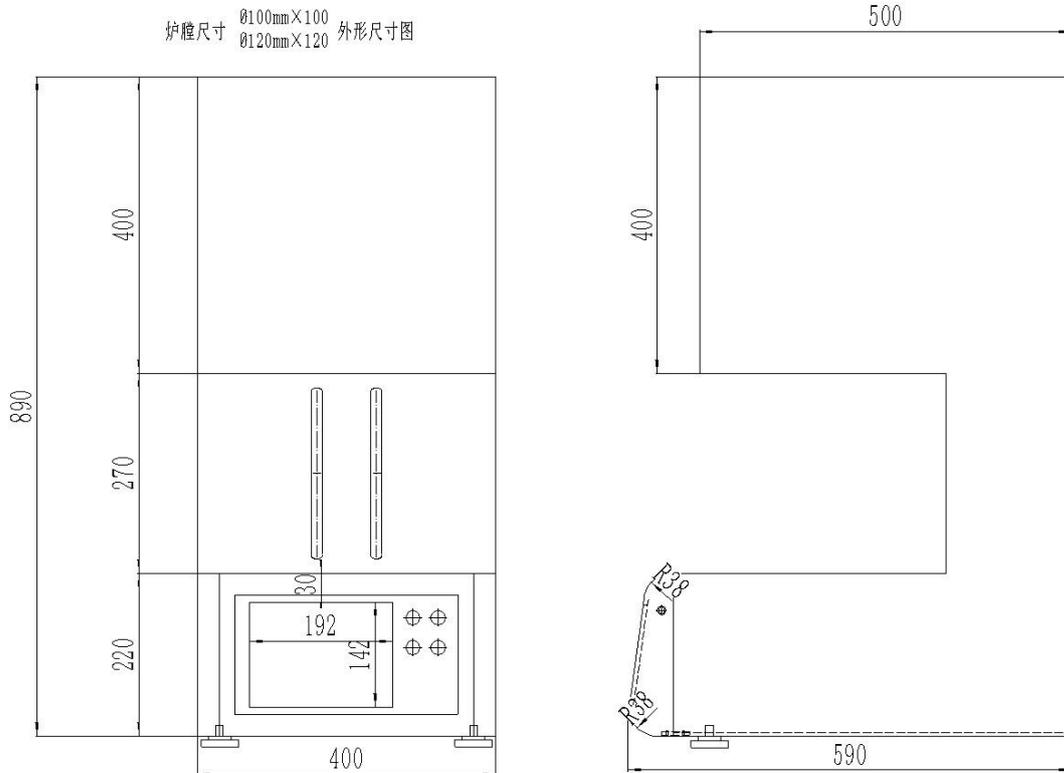

技术参数:

GWL-TSC 系列高温精密升降炉如图所示,集控制系统与炉膛为一体设计,炉衬使用采用进口德国 MESHUPP 真空成型高纯氧化铝纤维聚轻板材料。

采用硅碳棒或者硅钼棒为加热元件;是专为高等院校、科研院所的实验室及工矿企业对陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、金属、非金属及其它化和物材料进行烧结、融化、分析、生产而研制的专用设备。

控制面板配有触摸屏控制,控制电源开关、主加热工作/停止按钮,USB 接口,升降开关,蜂鸣器,以便随时观察本系统的工作状态,本产品采用可靠的集成化电路,工作环境好,抗干扰,最高温度时炉体外壳温度 $\leq 45^{\circ}\text{C}$ 大大提高了工作环境,微电脑程

主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province

序控制，可编程序曲线，全自动升温/降温，运行中可以修改控温参数及程序，灵活方便、操作简单。

技术指标：

温度项目	1200°C	1400°C	1600°C	1700°C	1800°C
电压 AC	220V/380V	220V/380V	220V/380V	220V/380V	220V/380V
最高工作温度	1250°C	1450°C	1650°C	1730°C	1820°C
长期工作温度	1200°C	1400°C	1600°C	1700°C	1800°C
控温精度	±1°C				
炉内温场均匀度	±1°C				
控温点	一个				
测温元件及测温范围	铂铑 S 测温范围 0-1700°C	铂铑 S 测温范围 0-1700°C	铂铑铂 B 测温范围 0-1820°C	铂铑铂 B 测温范围 0-1820°C	铂铑铂或者光纤红外测温
触摸屏全控	项目名称		参数		
	尺寸		7寸 10寸 14寸 TFT 真彩色,		
	外形尺寸		206W*156H*50D(mm) , 280W*200H*50D(mm)		
	分辨率		800*480		
	背光		LED		
	功率		5W		
	重量		1Kg		
	语言		中文/英文 可随意切换		
	全屏显示及操作		仪表屏、光柱图、历史趋势、数据报表、报警信息、数据导出、工艺流程、系统管理等		
	控制对象		温度		
	控制电炉数量		1-6 台		
	温度控制		触摸屏+高精度集成模块		
	启动升温		触摸操作，并支持无线鼠标		
	暂定升温				
停止升温					
转料台进出					
转料台升降					

主站：www.gwdl.com 邮箱：wgq@gwdl.com 联系方式：0379-69936789

地址：河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province



	启动、暂停、停止、编程等				
	流程图				
	按照电炉结构编制，或者按照产品工艺流程				
	温度曲线编制				
	触摸操作，每条曲线 30 段				
	温度曲线储存数量				
	无限制（每条曲线可中/英文命名）				
	实时状态显示				
	运行曲线名称、运行段号、段时间、段运行时间、数字温度、实时曲线、功率输出百分比				
	选择段号启动（跨段启动）				
	触摸操作				
	曲线量程				
	可调				
	历史曲线（图文）				
	大约储存 30 个月				
	数据报表（EXCEL）				
	大约储存 30 个月，多点同时显示（可插入优盘扩展）				
	历史曲线、报表记录（存盘）间隔时间				
	可调 1 秒-3600 秒，多点同时显示（可插入优盘扩展）				
	报警指示				
	变色（红色）				
	报警信息语言				
	中文显示（报警时间及事件中文描述）				
	数据导出接口				
	USB				
	打印机接口				
	并口				
	操作触摸屏保护				
	带密码设置（其他人无密码，禁止操作）				
	通讯端口				
	RS485				
升温速率	1°C/h 至 40°C/min 可调				
发热元件	硅碳棒	硅碳棒	1800 型硅钼棒	1800 型硅钼棒	1900 型硅钼棒/钨丝/石墨
发热元件安装位置及方式	垂直安装于炉膛四周	垂直安装于炉膛四周	垂直安装于炉膛四周	垂直安装于炉膛四周	垂直安装于炉膛四周
耐火材料	高纯氧化铝含锆纤维板	高纯氧化铝含锆纤维板	进口高纯氧化铝纤维板	进口摩根轻质材料	进口高纯摩根轻质材料
装料台升降	电动升降，升降过程中，可以任一点停止				
冷却结构	双层炉壳，风冷				
炉体温度	≤45 度				
计算机接口	RS485 RS232 USB				
保修范围及期限	电炉免费保修一年，发热元件不保修				
随机备件	发热原件两支、棒具两套，说明书一份，合格证一份，炉门隔热砖一块，坩埚钳一把，高温手套一副				

 主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号

 Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province



炉膛尺寸参数

炉膛尺寸 mm	电压	功率	重量 Kg	控制精 度	炉内温度均 匀性	外形尺寸 (mm)
直径 100*100	220V	1.8KW	75	±1°C	±1°C	590*400*920
直径 120*120	220V	2KW	85	±1°C	±1°C	590*400*920
直径 250*300	380V	10KW	180	±1°C	±1°C	750*550*1200
更多炉膛尺寸可根据客户要求定制						

主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province